

Orthopädische Weste System Dr. Berrehail

flexibel, elastisch und
höchst komfortabel

POLYSPORT

Produkte für Orthopädie, Sport und Therapie



Die Orthopädische Weste Dr. Berrehail ist eine Fertigbandage zur schmerzarmen Ruhigstellung der Schulter während einer konservativen Therapie oder in der postoperativen Zeit. Aufgrund ihres Materials passt sie sich jedem Körper sehr gut an und bietet dem Patienten höchsten Tragekomfort.

Orthopädische Weste System Dr. Berrehail, €€

Indikationen

Wir empfehlen die Orthopädische Weste im System Dr. Berrehail zur Ruhigstellung von Schulter und Oberarm nach Operationen oder konservativer Behandlung u.a. bei folgenden Indikationen:

- Humerusfraktur
- Schlüsselbeinfraktur
- Schultergelenkluxation
- Ruptur der Rotatorenmanschette

Extrem anpassungsfähig und flexibel

Aufgrund ihres weichen, elastischen Materials passt sich die orthopädische Weste den jeweiligen morphologischen Gegebenheiten besonders gut an. Zudem ist sie wendbar und kann daher sowohl für die Ruhigstellung des rechten als auch des linken Arms eingesetzt werden. Die Unterarmflexion lässt sich zwischen 90° und 130° stufenlos einstellen.

Vorteile: flexibler Einsatz, geringe Lagerhaltung

Luftdurchlässig und leicht

Die orthopädische Weste besteht aus einem perforierten, luftdurchlässigen und elastischen Gewebe (78% Polyamid und 22% Elastan). Diese Materialkombination macht die Weste nicht nur atmungsaktiv, sondern auch federleicht – und sorgt so für ein angenehmes Körperklima sowie höchsten Tragekomfort.

Vorteile: hoher Tragekomfort, zufriedene Patienten, positive Auswirkung auf den Heilungsverlauf

Einfach anzulegen

Durch ihren einfachen Schnitt lässt sich die orthopädische Weste mit wenigen Handgriffen ebenso schnell und leicht an- wie ablegen. Das Lösen der vorderen Sicherheits-Klettverschlüsse ist auch vom Patienten selbst problemlos durchführbar.

Vorteile: Vereinfachung von Nachsorge, Körperhygiene und Physiotherapie, dadurch Entlastung des Pflegepersonals

Problemlos hygienisch

Die orthopädische Weste ist bei 30°C waschbar. Um das beschädigungsfreie Waschen sicherzustellen, kann ein Wäschebeutel bestellt werden.

Vorteile: einfach zu reinigen, auch vom Patienten selbst

Wichtige Hinweise

Achtung: Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.

Die orthopädische Weste gibt es in drei Größen:

Bestellnr	Größe	Brustumfang
Orthopädische Weste System Dr. Berrehail		
51004	Erwachsene M	bis 120cm
51005	Erwachsene L	bis 140cm
51006	Erwachsene XL	über 140cm

Abduktor System Dr. Berrehail

flexibel in der Anwendung,
sicher im Sitz

POLYSPORT

Produkte für Orthopädie, Sport und Therapie



Der Abduktor Dr. Berrehail ist eine Fertigbandage zur schmerz armen Ruhigstellung der Schulter während einer konservativen Therapie oder in der postoperativen Zeit. Aufgrund seiner großen Anpassungsfähigkeit bietet er Patienten höchsten Tragekomfort und sicheren Halt.

Abduktor System Dr. Berrehail, €€

Indikationen

Wir empfehlen den Abduktor im System Dr. Berrehail zur Ruhigstellung von Schulter und Oberarm nach Operationen oder konservativer Behandlung u.a. bei folgenden Indikationen:

- Fraktur des Humeruskopfes
- Fraktur des Schlüsselbeins
- Schultergelenkluxation
- Ruptur der Rotatorenmanschette
- ImpingementSyndrom
- Bursitis subacromialis

Individuell anpassbar

Der Abduktor besteht aus einem vielfach modellierbaren Metallelement. Durch Biegen dieses Elementes lässt sich jeder beliebige Abduktionswinkel stufenlos einstellen. Der Abduktor kann ohne jeglichen Umbau sowohl links als auch rechtsseitig verwendet werden. Dank seiner hohen Flexibilität genügen drei Größen, um einen optimalen Sitz bei verschiedenen Patienten zu ermöglichen.

Vorteile: flexibler Einsatz, geringe Lagerhaltung

Komfortabel und leicht

Der Metallrahmen des Abduktors ist komplett mit weichem Schaumstoff aufgepolstert. Das verhindert unangenehme Druckstellen und gewährleistet einen außerordentlichen Tragekomfort. Auf der Innenseite ist der Abduktor mit Baumwollfrottee kaschiert, was auch im Sommer für ein angenehmes Körperklima sorgt. Das komplette AbduktorSystem wiegt nur 1300 Gramm und erleichtert dem ohnehin belasteten Patienten das Tragen erheblich.

Vorteile: hoher Tragekomfort, zufriedene Patienten, positive Auswirkung auf den Heilungsverlauf

Einfach anzulegen

Klettverschlüsse garantieren die sichere, feste Verbindung der individuell anpassbaren Teile des Abduktors. Zudem ist er sehr flexibel und lässt sich gleichermaßen zur Ruhigstellung der rechten oder linken Schulter verwenden. Alle Teile sind durchnummeriert, so dass sich der Abduktor Schritt für Schritt mit wenigen Griffen an und ablegen lässt. Das Lösen der Armbefestigung ist mit geringem Aufwand durchführbar, auch vom Patienten selbst.

Vorteile: Vereinfachung von Nachsorge, Körperhygiene und Physiotherapie, dadurch Entlastung des Pflegepersonals

Problemlos hygienisch

Die Überzüge des Abduktors lassen sich leicht entfernen und sind bei 30°C waschbar. Alle Gurte (mit Ausnahme einer Zusatzbefestigung) sind fest angenäht, um das Anlegen und das Zusammenbauen nach dem Waschen zu erleichtern. Um das beschädigungsfreie Waschen sicherzustellen, kann ein Wäschebeutel bestellt werden.

Vorteile: einfach zu reinigen, auch vom Patienten selbst



Den Abduktor gibt es in drei Größen:

Bestellnr	Größe	
Abduktor System Dr. Berrehail		
52002	Erwachsene < 1,70 m	M
52003	Erwachsene > 1,70 m	L

Knieorthesen System Dr. Berrehail

einfach in der Anwendung,
komfortabel im Sitz

POLYSPORT

Produkte für Orthopädie, Sport und Therapie



Knieorthesen System Dr. Berrehail, €€

Produktbeschreibung

Die Knieorthesen im System Dr. Berrehail bestehen aus einer gut gepolsterten Bandage und starren oder individuell einstellbaren Gelenken mit Sicherheitsabdeckung.

Die frottee kaschierten Knieorthesen zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus. Klettverschlüsse garantieren einen sicheren und festen, aber individuell anpassbaren Sitz der Knieorthesen. Breite Bänder und Klettverschlüsse verhindern ein Einschnüren. Einfache Applikation, auch direkt postoperativ, ist einer der großen Vorteile dieser Knieorthesen. Zwei Gelenkteile gewährleisten eine individuelle, der Morphologie des Gelenks entsprechende, optimale Anpassung.

Es werden zwei starre Schienen in den Winkelungen 0° oder 20° angeboten und eine individuell einstellbare Schiene. Die Einstellung ist bei dieser anhand einer Markierung leicht ablesbar.

Der frotteekaschierte Textilüberzug ist bei 30 °C waschbar.

Indikationen

- Traumatologie des Kniegelenks
- postoperative Rehabilitation
- chirurgische Versorgung des Knies und des Kniegelenks

Vorteile

- individuell anpassbar
- weich abgepolstert
- leicht
- einfache Handhabung
- kostengünstig
- **Eintrag der regulierbaren Knieschiene im Heil und Hilfsmittelkatalog unter: 05.04.03.1012**


Bestellnr	Größe		Ruhigstellung
Knieorthesen System Dr. Berrehail			
55000	Länge < 37 cm	P	0°
55001	Länge 44 cm	S	0°
55002	Länge 50 cm	M	0°
55003	Länge 56 cm	L	0°
55004	Länge > 63 cm	XL	0°
55100	Länge < 37 cm	P	20°
55101	Länge 44 cm	S	20°
55102	Länge 50 cm	M	20°
55103	Länge 56 cm	L	20°
55104	Länge > 63 cm	XL	20°
52301	Erwachsene	M	regulierbar
52302	Erwachsene	L	regulierbar
52311	Gelenk	M	regulierbar
52322	Gelenk	L	regulierbar
52333	Textilüberzug	M	regulierbar
52344	Textilüberzug	L	regulierbar

Anwendungshinweise

1. Alle Klettverschlüsse öffnen.
2. Schiene mit der ovalen Öffnung an der Kniekehle platzieren. Das breitere Teil muss dabei dem Oberschenkel zugeordnet sein.
3. Unter leichtem Zug zuerst das frottee-kaschierte Unterschenkelteil schließen.
4. Schließen der Oberschenkelmanschette.
5. Befestigen der beiden Gelenkschienen durch die Klettverschlüsse an der medialen und lateralen Seite in Höhe des Kniegelenks.
6. Schließen der Klettverschlüsse bzw. Bandagen zunächst über und unter der Patella, danach am Unter und Oberschenkelteil.

Bei der regulierbaren Knieorthese:

7. Einstellen des Gelenks in die gewünschte, bewegungseinschränkende Position.
- 7.1 Mit dem Imbusschlüssel die Arretierungsschraube herausdrehen.
- 7.2 Die Öffnung der Gelenkabdeckung in Flexions- und dann in Extensionsstellung der Sicherungsstifte drehen.
- 7.3 Die Sicherungsstifte in die Bohrung der gewünschte Bewegungswinkelbegrenzung einsetzen. Achten Sie auf gleiche Bewegungswinkelbegrenzungen sowohl in Flexions- als auch Extensionsrichtung.
- 7.4 Die Öffnung der Gelenkabdeckung erneut über die Position der Imbusschraube bringen.
- 7.5 Die Imbusschraube einsetzen und festschrauben.
- 7.6 Die Gelenkeinstellung ist damit fixiert. Durch die transparente Sicherheitsabdeckung ist der eingestellte Bewegungswinkel leicht ablesbar. Eine Veränderung des Bewegungswinkels ist nur nach erneuter Entfernung der Imbusschraube möglich. Somit ist die Manipulationsmöglichkeit auf ein Minimum reduziert.

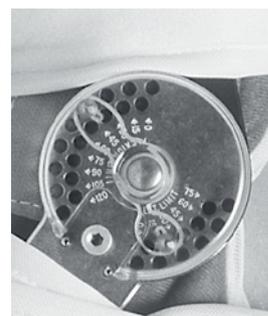

Wichtige Hinweise

Achtung: Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.



Polysport GmbH
An den 30 Morgen 25
D-61381 Friedrichsdorf
www.polysport24.de

Telefon +49 6172 / 93 79 71
Telefax +49 6172 / 93 79 72
Mobil +49 172 / 691 14 19
E-mail nt@polysport24.de